

咬合採得用付加型シリコーン印象材

Oxford Bite

オックスフォード バイト

ワンランクアップのクオリティー

オックスフォード バイトは
咬合状態をスピーディーかつ
精密に記録できる咬合採得用
シリコーン印象材です



口腔内保持時間

スピーディーな硬化で、
より精度の高い咬合採得

45
秒

ショアA硬さ

硬化後のショアA硬さ：87-91
ナイフや切削バー等でシャープに
調整ができる高いショアA硬さ

90

採得時の咬合抵抗が
少なく、無理なく
正確な咬合位置を記録

クリーム
タイプ

お得な

50mLのカートリッジが4本入
ご満足いただける低価格

4
本入



PENTRON JAPAN INC.

スピーディーな硬化

操作時間
15秒以上

口腔内保持時間
45秒

ペーストの押し出し操作は、軽くスムーズ。操作時間（15秒）内で、片側、両側を問わず歯列への注入が可能です。また、注入後はスピーディーに硬化が完了し、より精度の高い咬合記録を採得することができます。

硬化前のペーストは、きめの細かいクリームタイプ




硬化前のペーストは、咬合抵抗が少ないクリームタイプのため、患者さんの正確な咬合位置を記録できます。またチキソトロピー性に優れ、無圧状態では垂れにくく、加圧時にはスムーズに流れるので、さまざまな採得方法にも対応できます。

ショアA硬さ：87～91



ナイフによるトリミング

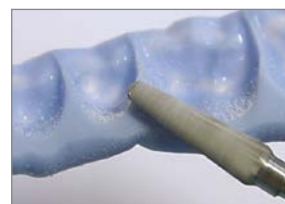

切削バーによるトリミング

硬化物は適度な硬さがあり、ナイフや切削バー等でシャープなトリミングが可能です。

安定した寸法精度

付加型シリコンを採用し、硬化後長期間にわたり安定した寸法精度を維持します。

低価格を実現

高品質なバイトマテリアル オックスフォード バイト（50mLカートリッジ）4本入で、ご満足いただける低価格を実現しました。

オックスフォード バイト 包装内容



カートリッジ：50mL×4本
T-ミキサーチップ ×10本
イントラオーラルチップ（バイト）×10本

一般医療機器 歯科材料 歯科用印象材料 歯科咬合採得用材料 (70883000) 届出番号:1382X00022000069号

単品販売

● T-ミキサーチップ


チップ内残量が従来品と比べて30%削減



50本入

一般医療機器 機械器具 65 歯科用充填器 歯科用充填・修復材補助器具 (38782000) 届出番号:1382X00022000069号

● イントラオーラルチップ（バイト）

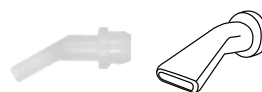

50本入

一般医療機器 機械器具 65 歯科用充填器 歯科用充填・修復材補助器具 (38782000) 届出番号:1382X00022000070号

関連商品

● ディスペンサーガン （50mLカートリッジ用）



一般医療機器 機械器具 65 歯科用充填器 歯科用充填・修復材補助器具 (38782000) 届出番号:1382X00022000013号

ご使用の際は、製品添付文書を必ずご確認ください。

PENTRON®
JAPAN INC. 
www.j-pentron.com

製造販売元

ペンترون ジャパン株式会社

〒140-0014 東京都品川区大井 4-13-17 5F-6F
TEL.03-5746-0316 FAX.03-5746-0320